

採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的程序


步驟（採集樣本前後都應以梘液及清水潔手最少二十秒；如雙手沒有明顯污垢時，可用含70至80%酒精的搓手液潔淨雙手）：




1. 從無菌包裝中取出拭子時應只拿著握桿。切勿觸摸拭子頭部（即採樣部份）。




2. 頭部稍微向後傾以調正鼻道。

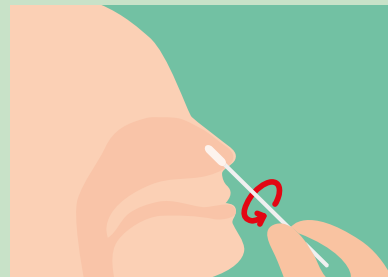


3. 將拭子以鼻樑平行的方向輕輕伸進鼻孔的1至2厘米深，或直至感到阻力。將拭子輕輕旋轉並停留10至15秒。將拭子退出時亦同時慢慢旋轉。

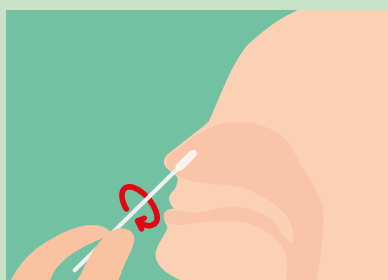


4. 以同一支拭子於另一個鼻孔採集樣本。

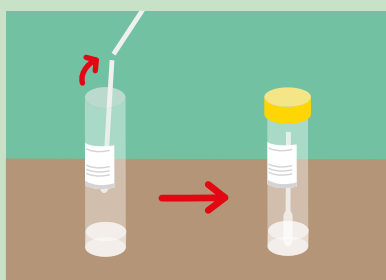

5. 在凹位把拭子折斷並將拭子頭部（即採樣部份）插進有保存液的樣本瓶內。

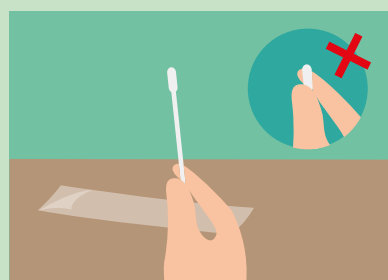


6. 取出另一支拭子時應只拿著握桿。切勿觸摸拭子頭部（即採樣部份）。

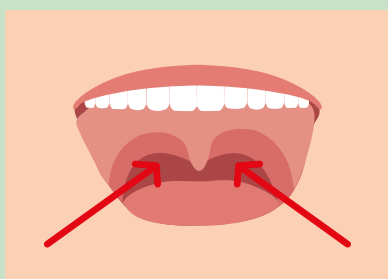

7. 面對鏡，頭微仰，張開口，用拭子伸入咽喉後部及扁桃腺位置。



8. 發出「Ah」的聲音。然後將拭子在扁桃腺柱及口咽喉後部拭抹3次，避免觸碰到舌頭，牙齒及牙齦。

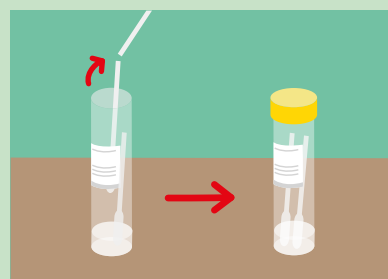

9. 在凹位把拭子折斷並將拭子頭部（即採樣部份）放進同一個樣本瓶內，擰緊瓶蓋以防止滲漏。確保資料已填妥在瓶上標籤。將樣本瓶放入樣本袋中，然後再放入第二個袋內，並將填好的表格放在外袋後，儘快送往化驗。